




BEŽIČNI  
ORALNI TUŠ

**Dental Yoga**

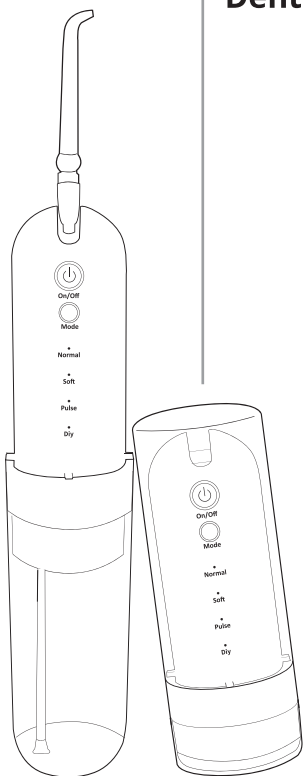

UPUTSTVO  
ZA UPOTREBU

# Bezbednosno uputstvo

Prilikom upotrebe električnih uređaja, posebno kada su deca prisutna, potrebno je slediti niže navedene mere predostrožnosti.

**PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRE UPOTREBE !**

## OPASNOSTI

Da umanjite rizik od električnog udara:

- Ne rukujte ispravljačem niti USB kablom mokrim rukama.
- Ne potapajte uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ne koristite uređaj tokom kupanja.
- Nemojte ostavljati niti odlagati uređaj na mesta sa kojih može pasti ili biti povučen u tuš kabinu ili lavabo.
- Ne posežite za proizvodom koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz mreže.
- Proverite USB kabl pre upotrebe i tokom životnog veka uređaja, kako biste se uverili da na istom ne postoje oštećenja.

## UPOZORENJA

Da umanjite rizik od opekotina, strujnog udara, vatre, ozbiljnih povreda ili oštećenje tkiva:

- Nemojte uključivati uređaj u mrežu čiji napon se razlikuje od napona specificiranom na uređaju ili ispravljaču.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj ukoliko mu je oštećen kabl ili utičnica, ukoliko ne radi kako bi trebalo ili je ispušten u bilo koju tečnost. Obratite se ovlašćenom servisu preduzeća Prizma.
- Ne usmeravajte vodu ispod jezika, u uho ili neku drugu delikatnu regiju. Ovaj uređaj je sposoban da proizvede pritisak koji može uzrokovati ozbiljna oštećenja u ovim regijama.
- Upotrebljavajte ovaj proizvod samo kako je navedeno u ovom uputstvu i prema savetima Vašeg stomatologa.
- Napunite rezervoar vodom ili tečnošću preporučenom od strane stomatologa.
- Nemojte ispuštati niti umetati strani predmet u bilo koji otvor na uređaju.

Za punjenje baterije koristite ispravljač proverenog kvaliteta (na pr. ispravljač mobilnog telefona) i isključivo USB kabl za punjenje baterije uređaja iz sadržaja kompleta oralnog tuša Dental Yoga.

Ispravljač i kabl držite dalje od zagrejanih površina.

Nemojte koristiti uređaj u prostoru u kome se koristi kiseonik ili aerosol sprejevi.

Nemojte koristiti sredstva za ispiranje usta koja sadrže jod, izbeljivače ili ulje čajevca.


Nemojte koristiti uređaj dok nosite bilo koju vrstu oralnog nakita. Uklonite nakit pre upotrebe uređaja.

Nemojte koristiti uređaj ukoliko imate otvorene rane na jeziku ili u ustima.

Ljude umanjjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti (uključujući decu) ili one koje nemaju iskustvo i znanje o upotrebi, pažljivo uputite u način korišćenja uređaja.

Decu treba nadzirati kako se ne bi igrala uređajem.





# Specifikacija proizvoda

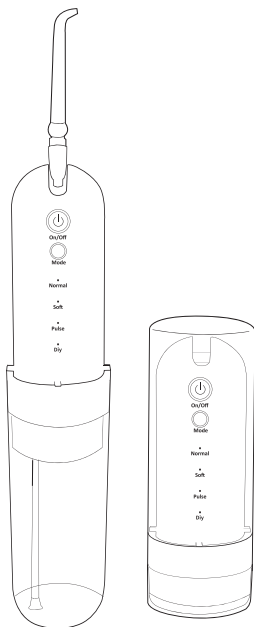

Materijal	Telo ABS, PC rezervoar za vodu / donji poklopac
Kapacitet rezervoara	150 ml
Pritisak tečnosti	10-110 psi
Baterija	2000 mAh Li-ion
Napon/frekvencija	100-240 V, 50/60 Hz
Snaga	4-6 W
Indikacija punjenja	Lampice režima rada blinkaju tokom punjenja, a kontinualno svetle za potpuno napunjen uređaj (svetle 4 lampice)
Vreme punjenja	4-5 h
Trajanje pune baterije	15 dana (pri upotrebi tri puta dnevno)
Ispravljač	5,0 V; 1,0 A
Da biste proverili preostali kapacitet baterije	Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje i držite 3 sekunde, a zatim otpustite. Broj lampica režima rada koje svetle pokazuju nivo napunjenosti baterije (puna baterija - svetle 4 lampice)


## Opis proizvoda:

1. Transparentni gornji poklopac/rezervoar za vodu/tečnost
2. Priključak za punjenje baterije
3. Donji poklopac
4. Oralni nastavci:  
standardni (za ispiranje mlazom)  
periodontalni (za zubne džepove)  
ortodontski (za zubne proteze)
5. Taster za uključivanje
6. Taster za izbor režima rada:  
*Normal* – za svakodnevno održavanje oralne higijene  
*Soft* – nežno čišćenje zuba i desni, režim posebno pogodan za osetljive desni  
*Pulse* – pulsni režim čišćenja zuba i desni, posebno pogodan za masažu desni  
*DIY* – personalizovani režim rada
7. Indikator režima rada/punjenja
8. Produžna cev
9. USB Kabl za punjenje baterije uređaja

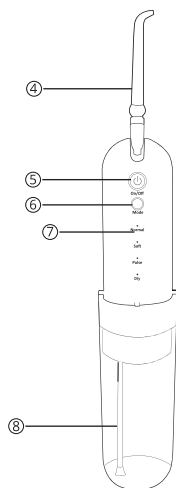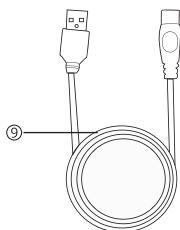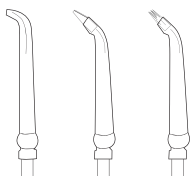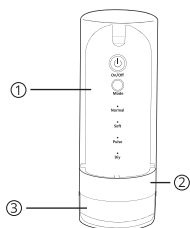


# Uputstvo za upotrebu:

1. Odbravite i uklonite posudu za vodu/tečnost

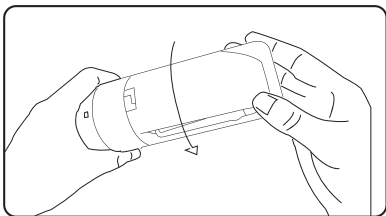


2. Odbravite i uklonite donji poklopac

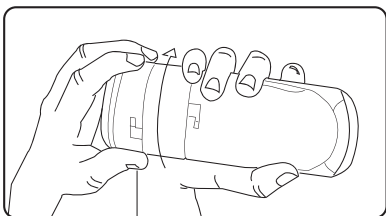


3. Postavite željeni nastavak u predviđeni priključak i ispravite priključak.


Priključak se može rotirati u opsegu od 180°, dok se postavljene oralni nastavak može rotirati u opsegu od 360°

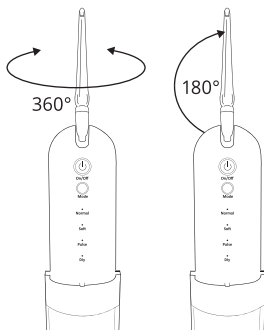

4. Izvucite produžnu cev sa donje strane uređaja

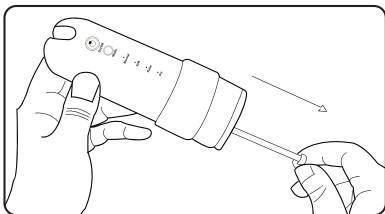

5. Napunite rezervoar vodom do oznake MAX i povežite ga sa telom uređaja.

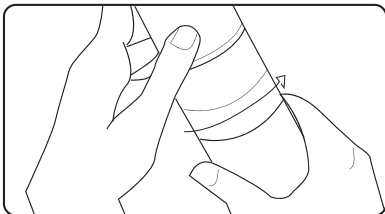

6. Usmerite mlaz pod uglom od 90° u odnosu na desni.

7. Uključite uređaj i izaberite željeni režim rada

8. Zatvorite usne alii ne sasvim da biste omogućili vodi da slobodno otiče iz Vaših usta u lavabo. Za najbolje rezultate krenite od zadnjih ka prednjim zubima. Pratite liniju desni i kratko pauzirajte između zuba.

9. Nastavite sa ispiranjem/čišćenjem dok sve regije oko i između zuba ne budu očišćene.

10. Po završetku, isključite uređaj, a rezervoar za tečnost ispraznite i osušite pre odlaganja.

## DIY – Personalizovani režim rada

DIY je režim rada u kome korisnik podešava jačinu pritiska prema sopstvenim potrebama.

Prvo izaberite „DIY“ režim rada, zatim pritisnite i neprekidno držite taster za izbor režima rada, tada će se pritisak postepeno povećavati od slabog do jakog, dok će indikator „DIY“ režima istovremeno blinkati.

Otpustite taster za odabir režima rada, kada postignete željeni pritisak.

## Čišćenje uređaja

Nakon upotrebe posebnog rastvora, izdvojite vreme da uređaj isperete nakon upotrebe. Delimično napunite rezervoar mlakom vodom, usmerite vrh nastavka ka lavabou, uključite uređaj i dozvolite da se rezervoar isprazni na taj način. Ovakva praksa će sprečiti zapušavanje nastavaka i pomoći da uređaj traje duže. Prebrišite uređaj kada je neophodno suvom krpom i nežnim neabrazvnim sredstvom za čišćenje.

Pre čišćenja, isključite uređaj iz mreže.

Pre izlaganja uređaja temperaturama smrzavanja, uklonite rezervoar i pustite da uređaj radi dok ne bude potpuno prazan.

## Održavanje uređaja

1. Nakon upotrebe oralnog tuša, obavezno isključite kabl za punjenje, postavite rezervoar naopako na ravnu površinu. Ukoliko uređaj ne koristite duže vreme, odložite ga u kutiju ili prostor namenjen za odlaganje.
2. Kada uređaj ima problema u funkcionisanju, obratite se prodavcu ili ovlašćenom servisu preduzeća Prizma.
3. Ne pokušavajte da samostalno rasklapate ili popravljate uređaj.
4. Kada je USB kabl za punjenje oštećen, obratite se ovlašćenom servisu preduzeća Prizma. Nemojte sami menjati kabl.

---

**PRIZMA KRAGUJEVAC DOO**

Kragujevac, Kumanovska 8

BESPLATAN POZIV **0800 200 000**

E-mail: [info@prizma.rs](mailto:info@prizma.rs)



Očitajte QR kod  
i pronađite Vama najbližu prodavnicu

---



[www.prizma.rs](http://www.prizma.rs) • online prodavnica

# IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

Izjavljujemo da je proizvod saobrazan ugovoru u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Zakonski rok saobraznosti iznosi **dve godine** od datuma kupovine proizvoda, a što se dokazuje fiskalnim ili drugim računom.

Ukoliko je proizvod nesaobrazan zbog neispravnosti komponenti ili drugih nedostataka u izradi, isti će biti popravljen ili zamenjen bez novčane nadoknade.

## **Izjava se ne odnosi na:**

**Potrošni materijal:** oralni nastavci (označeno na strani 3 ovog uputstva za upotrebu)

**Pribor isporučen uz proizvod:** torbica za odlaganje uređaja

## **Proizvod koji je neispravan usled:**

- Mehaničkih oštećenja (krivicom kupca ili treće osobe) i curenja baterije
- Nepoštovanja preporuka datih u uputstvu za upotrebu i neodgovarajuće brige o proizvodu
- Vršjenja popravki, prepravki ili izmena u strukturi proizvoda od strane neovlašćenih lica
- Upotrebe potrošnog materijala pribora i delova koje nije isporučio proizvođač (rezervoar za tečnost, oralni nastavci i sl.)
- Delovanja više sile ili prirodnih nepogoda kao što su poplave, požari, zemljotresi, udari groma i dr.



**PRIZMA KRAGUJEVAC DOO**