

Uputstvo za upotrebu



Uputstvo za upotrebu


Hvala Vam što ste izabrali V01 četkicu za zube.

Pažljivo pročitajte uputstvo pre korišćenja i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

1. Karakteristike proizvoda:

- Sonične vibracije, preko 39000 u minuti, dinamično čišćenje
- Četiri moda (režima) rada:
ČIŠĆENJE, IZBELJIVANJE, MASAŽA i BRIGA O DESNIMA
- Jedinstven dizajn vlakana četkice (*medium* vlakna) za detaljno čišćenje čak i teško dostupnih delova
- Dvominutni pametni tajmer sa intervalnim pauzama svakih 30 sekundi
- Zamenljiv nastavak sa četkicom
- Vodootpornost stepena IPX7
- USB punjenje, jednostavno i pogodno za upotrebu u kući ili na putovanju
- Dugotrajna baterija koja potpuno napunjena traje približno 50 dana (značajno duže vreme u odnosu na uobičajene električne četkice)

2. Opis proizvoda

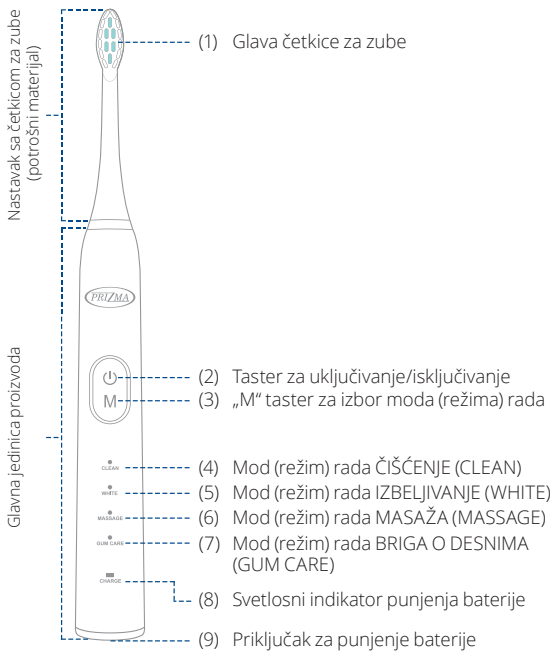

Sadržaj kompleta

- Glavna jedinica proizvoda,
- 2 nastavka sa četkicom za zube (medium vlakana),
- USB kabl, uputstvo za upotrebu.

3. Upotreba četkice za zube



1. Postavite nastavak sa četkicom za zube na glavnu jedinicu proizvoda pravilno, postavljanjem istog do „prstena“



2. Izaberite željeni mod (režim) rada pritiskom na taster „M“. Uzastopnim pritiskanjem tastera „M“ možete izabrati neki od četiri moda (režima):

- ČIŠĆENJE (CLEAN),
- IZBELJIVANJE (WHITE),
- MASAŽA (MASSAGE) i
- BRIGA O DESNIMA (GUM CARE).



3. Nakvasite vlakna glave četkice i nanesite odgovarajuću količinu paste za zube.



4. Postavite vlakna četkice na koju je nanesena pasta na zube pod blagim uglom prema liniji desni.



5. Uključite četkicu pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.



6. Nežno pomerajte glavu četkice za zube preko zuba na prednjoj, zatim zadnjoj površini i površini za žvakanje. Ne pritiskajte previše na zube i ne zadržavajte se duže vreme na jednom mestu.



7. Stomatolozi preporučuju pranje zuba 2 minuta. Tajmer četkice je podešen na 2 minuta, sa intervalnim pauzama nakon svakih 30 sekundi.



8. Pređite na narednu sekciju kada osetite intervalnu pauzu, a četkica će se automatski isključiti nakon dva minuta.



9. Da izbegnete prskanje paste za zube, četkicu uključite tek kada ste je postavili na zube i sklonite nakon isključivanja.




Posle pranja zuba, isperite usta i glavu četkice za zube čistom vodom.

Nakon isključivanja, četkicu čuvajte na suvom mestu.

Punjenje četkice za zube

- Kada je baterija slaba, pojavljuje se crveni svetlosni indikator ukazujući da je potrebno napuniti bateriju.
- Povežite četkicu za zube sa izvorom napajanja od 5 V / 1 A preko USB kabla i tada će svetlosni indikator prestati da treperi ukazujući da je punjenje u toku.
- Kada je baterija potpuno napunjena, svetlosni indikator će promeniti boju u zeleno.

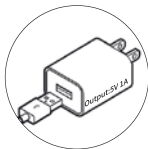

- Prilikom prvog punjenja ili nakon dugog perioda nekorisćenja proizvoda, svetlosni indikator neće svetleti prvih pet minuta.

Četiri moda (režima) rada

ČIŠĆENJE (CLEAN)	Efikasno čišćenje zuba
IZBELJIVANJE (WHITE)	Čišćenje zuba i izbeljivanje
MASAŽA (MASSAGE)	Masaža i briga o osetljivim desnama
BRIGA O DESNIMA (GUM CARE)	Ne oštećuje dodatno desni

4. Specifikacije

Napajanje: DC 3,7 V

Materijal izrade: ABS/Silikon

Vlakna: DuPont – sa indikatorom istrošenosti

Potrošnja: 0,05 W

Radna temperatura: 0 – 50 °C

5. Mere predostrožnosti

- Nemojte rasklapati, popravljati ili menjati proizvod bez ovlašćenja.
- Korisnici koji boluju od teških parodontalnih oboljenja ili su nedavno imali oralne hirurške intervencije, pre upotrebe proizvoda neophodno je da konsultuju stomatologa.
- Deca, novorođenčad, kao i osobe koje ne mogu samostalno da rukuju četkicom za zube moraju biti pod nadzorom roditelja ili odrasle osobe.
- Nemojte potapati proizvod u vodu na duže vreme.
- Nemojte izlagati četkicu za zube visokoj temperaturi niti direktnim sunčevim zracima.
- Nemojte jako pritiskati vlakna četkice na zube ili desni.

⚠ Zameniti nastavak sa četkicom za zube novim kada plava boja vlakana postane svetlija ili na tri meseca.

Četkica za zube je usklađena sa bezbednosnim standardima elektromagnetnih uređaja.

Za probleme koji mogu biti uzrokovani pejsmejkerom ili drugim implantatima, molimo da pre upotrebe konsultujete svog lekara ili proizvođača implantata.

Često postavljana pitanja i problemi koji se mogu pojaviti

P1. Problem sa krvarenjem desni

O1. Uzimajući u obzir da ovaj proizvod koristi soničnu tehnologiju i vibracije visoke frekvencije, može uzrokovati krvarenje ili svrab/peckanje prilikom prve upotrebe. To je normalna pojava. Započnite upotrebu sa modom BRIGA O DESNIMA (GUM CARE). Ukoliko se krvarenje desni nastavi posle mesec dana upotrebe, prekinite sa korišćenjem proizvoda i obratite se svom stomatologu.

P2. Oštećenje vlakana glave četkice za zube

O2. Proizvod koristi DuPont vlakna, koja su prošla relevantne testove izdržljivosti i stoga se smatraju bezbednim i pouzdanim. Do oštećenja vlakana može doći usled dugotrajnog korišćenja (preporuka je menjati ih na tri meseca) ili jakog pritiskanja na zube prilikom pranja istih. Molimo Vas da koristite električnu četkicu pravilno, nežno pomerajući vlakna preko površine zuba.

P3. Pojava buđi na vlaknima

O3. Nakon pranja zuba, isperite glavu četkice za zube i odložite je na suvo mesto nakon isključivanja.

P4. Četkica za zube se ne uključuje / ne radi

O4. Napunite bateriju. Ukoliko i nakon punjenja ne radi, konsultujte servisnu službu prodavca.

P5. Velika buka tokom rada

O5. Četkica koristi soničnu vibracionu tehnologiju, ista emituje zvuk koji nije preglasan. Bez obzira na to što četkica koristi vibracije visoke frekvencije, držanje u ruci tokom pranja zuba ne treba da izaziva osećaj nelagodnosti.

P6. Koliko dugo traje pranje zuba?

O6. Preporuka stomatologa je da se zubi peru dva minuta. Tokom upotrebe, osetićete kratku pauzu na 30 sekundi, koja Vas podseća da treba krenuti na čišćenje naredne regije, tako da sve četiri regije očistite za dva minuta.



www.prizma.rs

SHOP online

PRIZMA KRAGUJEVAC DOO

Kragujevac, Kumanovska 8

Telefon: +381 (34) 330 200; Faks: +381 (34) 336 147

BESPLATAN POZIV 0800 200 000

E-mail: info@prizma.rs

Prizma – prodavnice:

Beograd	• Pop Lukina 12	+381 (11) 328 65 55
	• Požeška 80	+381 (11) 655 08 87
	• Takovska 18	+381 (11) 655 08 88
	• Terazije 35	+381 (11) 655 08 89
	• Bulevar Kralja Aleksandra 170 (Đeram)	+381 (11) 735 95 15
	• Bulevar Kralja Aleksandra 60	+381 (11) 360 73 88
Novi Beograd	• Bulevar umetnosti 4 (Mercator Centar)	+381 (11) 745 86 91
Zemun	• Gospodska 11	+381 (11) 655 87 13
Pančevo	• Svetog Save 5	+381 (13) 219 08 00
Kragujevac	• Kumanovska 8	+381 (34) 330 200
	• Dr Zorana Đinđića 9	+381 (34) 353 967
	• Kralja Aleksandra I Karađorđevića 58	+381 (34) 356 890
Novi Sad	• Šafarikova 9	+381 (21) 661 07 18
Subotica	• Matka Vukovića 5	+381 (24) 552 926
Niš	• Vožda Karađorđa 10	+381 (18) 250 808
Čačak	• Kuželjeva 25	+381 (32) 515 02 01
Kraljevo	• Cara Lazara 46	+381 (36) 515 00 91
Valjevo	• Karađorđeva 59	+381 (14) 315 01 64
Šabac	• Vojvode Mišića 15	+381 (15) 715 06 00



očitajte QR kod i pronađite Vama najbližu prodavnicu

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

Izjavljujemo da je proizvod saobrazan ugovoru u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Zakonski rok saobraznosti iznosi dve godine od datuma kupovine proizvoda, a što se dokazuje fiskalnim ili drugim računom.

Ukoliko je proizvod nesaobrazan zbog neispravnosti komponenti ili drugih nedostataka u izradi, isti će biti popravljen ili zamenjen bez novčane nadoknade.

Izjava se ne odnosi na:

Potrošni materijal: nastavci sa četkicom za zube (označeno u odeljku „2. Opis proizvoda“ ovog uputstva za upotrebu)

Proizvod koji je neispravan usled:

- Mehaničkih oštećenja (krivicom kupca ili treće osobe) i curenja baterije
- Nepoštovanja preporuka datih u uputstvu za upotrebu i neodgovarajuće brige o proizvodu
- Vršnja popravki, prepravki ili izmena u strukturi proizvoda od strane neovlašćenih lica
- Upotrebe potrošnog materijala i delova koje nije isporučio proizvođač (nastavci sa četkicom za zube)
- Delovanja više sile ili prirodnih nepogoda kao što su poplave, požari, zemljotresi, udari groma i dr.



PRIZMA KRAGUJEVAC DOO