


PRI/MA

AUTOMATSKI APARAT ZA MERENJE KRVNOG PRITISKA

RS2

(za članak ruke)

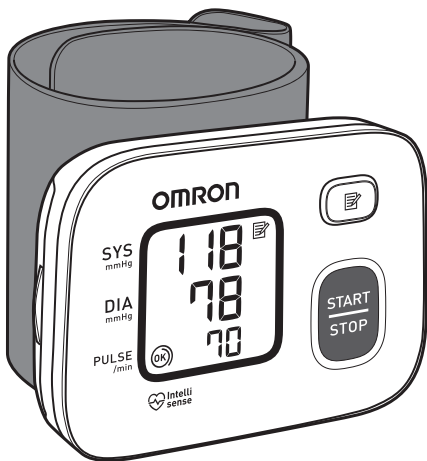

OMRON

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PRIZMA KRAGUJEVAC DOO

Kragujevac, Kumanovska 8

BESPLATAN POZIV **0800 200 000**

E-mail: info@prizma.rs



Očitajte QR kod
i pronađite Vama najbližu prodavnicu

PRIZMA


www.prizma.rs • online prodavnica

Sadržaj

Uvod.....	2
Važne bezbednosne informacije	3
1. Upoznajte svoj aparat.....	7
1.1 Sadržaj.....	7
1.2 Aparat za merenje krvnog pritiska	7
1.3 Ekran i simboli	8
2. Priprema	10
2.1 Postavljanje baterija	10
2.2 Saveti u vezi sa merenjem krvnog pritiska	11
2.3 Postavljanje manžetne na članak ruke	11
2.4. Pravilno sedenje	13
3. Korišćenje aparata	14
3.1 Merenje krvnog pritiska	14
4. Korišćenje funkcije memorije.....	15
4.1 Pregledanje rezultata merenja sačuvanih u memoriji	15
5. Druga podešavanja	16
5.1 Brisanje svih rezultata merenja sačuvanih u memoriji	16
6. Poruke o grešci i rešavanje problema	17
7. Održavanje	19
7.1 Održavanje	19
7.2 Skladištenje.....	19
7.3 Čišćenje.....	19
7.4 Baždarenje i održavanje.....	19
8. Tehnički podaci	20
9. Smernice i deklaracija proizvođača	22

Uvod

Hvala Vam što ste kupili RS2 automatski aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa na članku ruke. Ovaj aparat za merenje krvnog pritiska je predviđen za postavljanje na članak ruke. Aparat RS2 koristi oscilometrijski metod za merenje krvnog pritiska. Kada se manžetna napumpava aparat oseća pulsiranje pritiska arterije ispod manžetne. Ovi impulsi se nazivaju oscilometrijski impulsi. Elektronski senzor pritiska prikazuje rezultate merenja krvnog pritiska na LCD ekranu.

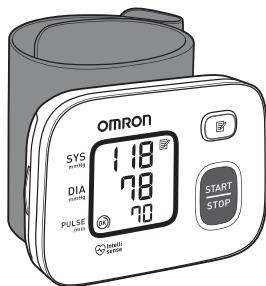

Bezbednosna uputstva

Ovo uputstvo za upotrebu pruža važne informacije o automatskom aparatu za merenje krvnog pritiska i pulsa na članku ruke RS2. Da bi upotreba ovog aparata bila zagarantovano bezbedna i pravilna, PROČITAJTE sa RAZUMEVA-NJEM sva bezbednosna uputstva i uputstva za rad. Ako ne razumete ova uputstva ili imate bilo kakva pitanja, obratite se prodavcu i/ili preduzeću PRIZMA KRAGUJEVAC DOO pre korišćenja aparata. Za konkretne informacije o svom krvnom pritisku obratite se lekaru.

Namena

Ovaj automatski aparat je predviđen za merenje krvnog pritiska i pulsa kod odraslih pacijenata sa obimom članka ruke u rasponu od 13,5cm do 21,5cm. Aparat RS2 detektuje nepravilne otkucaje srca tokom merenja i daje signal upozorenja uz rezultat merenja. Aparat je dizajniran uglavnom za upotrebu kod kuće.

Prijem i provera

Izvadite aparat iz pakovanja i proverite da li ima oštećenja. Ako je aparat oštećen, **NE KORISTITE** ga i obratite se prodavcu ili preduzeću PRIZMA KRAGUJEVAC DOO.

Želimo Vam dobro zdravlje!

Vaša PRIZMA Kragujevac

Važne bezbednosne informacije

Pročitajte važne bezbednosne informacije u ovom uputstvu za upotrebu pre korišćenja aparata.

Pridržavajte se ovog uputstva za upotrebu radi svoje bezbednosti. Sačuvajte ga kao podsetnik u budućnosti. Za konkretne informacije o svom krvnom pritisku OBRATITE SE LEKARU.



Upozorenje

Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne, može da dovede do smrti ili ozbiljne povrede.

- **NEMOJTE** da koristite ovaj aparat za merenje krvnog pritiska na odojčadi, bebama, deci ili osobama koje ne mogu da izraze svoje potrebe.
- **NE menjajte** terapiju lekovima na osnovu rezultata dobijenih ovim aparatom za merenje krvnog pritiska. Uzimajte terapiju koju Vam je propisao lekar. SAMO je lekar kvalifikovan da Vam postavi dijagnozu visokog krvnog pritiska i propiše terapiju.
- **NE koristite** ovaj aparat za merenje krvnog pritiska na povređenom članku ili na članku koji se nalazi pod medicinskim tretmanom.
- **NE postavljajte manžetnu** na članak ruke dok primате infuziju ili transfuziju.
- **NE koristite** ovaj aparat za merenje u oblastima u kojima se nalazi visoko frekventna hirurška oprema, oprema za magnetnu rezonancu (MRI), skeneri za kompjuterizovanu tomografiju (CT). To može da dovede do nepravilnog rada aparata i/ili netačno izmerenih vrednosti.
- **NE koristite** ovaj aparat u okruženjima sa dosta kiseonika ili u blizini zapaljivog gasa.
- **Posavetujte se sa svojim lekarom** pre upotrebe ovog aparata za bilo koje od sledećih stanja: uobičajene aritmije, kao što su atrijski ili ventrikularni prevremeni srčani otkucaji ili atrijska fibrilacija; ateroskleroza, slaba perfuzija, dijabetes, trudnoća, preeklampsija ili bubrežna oboljenja.
- **NIKADA sami ne postavljajte dijagnozu** i ne određujte lečenje na osnovu rezultata. UVEK se posavetujte sa svojim lekarom.
- Ovaj proizvod **sadrži male delove** koji mogu prouzrokovati gušenje ukoliko ih progutaju deca, bebe ili odojčad.

Rukovanje baterijama i upotreba baterija

- Držite baterije **van domašaja** beba, odojčadi i dece.



Bezbednosne napomene

Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne, može da dovede do manje ili umerene povrede korisnika ili pacijenta ili da prouzrokuje oštećenje opreme ili ostale imovine.

- **Prekinite upotrebu** ovog aparata i **posavetujte se sa svojim lekarom** ako dođe do iritacije kože ili drugih nelagodnosti.
- **Posavetujte se sa lekarom** pre korišćenja aparata na članku ruke na kom se vrši intravaskularni pristup ili terapija ili na kom postoji arteriovenski (AV) šant zbog privremenog ometanja protoka krvi, što može rezultirati povredom.
- **Posavetujte se sa svojim lekarom** pre upotrebe ovog aparata ako ste obavili mastektomiju.
- **Posavetujte se sa svojim lekarom** pre upotrebe ovog aparata ako imate ozbiljnih problema sa protokom krvi ili oboljenja krvi jer napumpavanje manžetne može izazvati modrice.
- **Merenja NE vršite češće nego što je neophodno**, jer se mogu pojaviti modrice zbog smetnji u protoku krvi.
- Manžetnu pumpajte SAMO kada se nalazi **na članku ruke**.
- **Skinite manžetnu** sa članka ruke ako ne počne da se ispušćava tokom merenja.
- **NE koristite ovaj aparat** ni u jednu drugu svrhu osim za merenje krvnog pritiska.
- Tokom merenja krvnog pritiska, **vodite računa** da se mobilni telefoni ili bilo koji drugi električni uređaji koji emituju elektromagnetna polja ne nalaze na udaljenosti manjoj od **30 cm od ovog aparata**. To može da dovede do nepravilnog rada aparata i/ili netačno izmerenih vrednosti.
- **NE rastavljajte i ne pokušavajte da popravite aparat** ili druge komponente. Ovo može prouzrokovati neprecizno merenje.
- **NE koristite aparat** na mestu gde postoji vlaga ili gde postoji opasnost od prskanja vode na aparat. To može dovesti do oštećenja aparata.
- **NE koristite** ovaj aparat u vozilu koje je u pokretu, na primer u automobilu.
- **NE ispuštajte** niti izlažite aparat snažnim udarcima ili vibracijama.
- **NE koristite** ovaj aparat na mestima sa visokom ili niskom vlažnošću ili visokim ili niskim temperaturama. Pogledajte poglavlje 8.

- **Vodite računa** da ovaj aparat ne utiče na cirkulaciju krvi tako što ćete posmatrati članak ruke tokom merenja.
- Ovaj aparat **NE koristite** u okruženjima sa velikom učestalošću upotrebe kao što su medicinske klinike ili lekarske ordinacije.
- **NE koristite** ovaj aparat istovremeno sa drugom medicinskom električnom (ME) opremom. To može da dovede do nepravilnog rada aparata i/ili netačno izmerenih vrednosti.
- **Izbegavajte** da se kupate, konzumirate alkohol ili kofein, pušite, vežbate i uzimate hranu najmanje 30 minuta pre merenja.
- **Odmorite se** najmanje 5 minuta pre merenja.
- **Sklonite** tesnu ili debelu odeću i druge predmete sa članka za vreme obavljanja merenja.
- **Ostanite mirni i NE govorite** za vreme merenja.
- Ovaj aparat koristite SAMO kod osoba čiji je obim članka ruke **u okviru navedenog raspona** manžetne.
- **Vodite računa** da se ovaj aparat prilagodi sobnoj temperaturi pre merenja. Merenje nakon ekstremne promene temperature može dovesti do netačnog rezultata. Kompanija OMRON preporučuje da sačekate oko 2 sata da se aparat zagreje ili ohladi kada se koristi u okruženju u kom je temperatura u okviru navedenih radnih uslova nakon čuvanja na maksimalnoj ili minimalnoj temperaturi skladištenja. Za dodatne informacije o radnoj i temperaturi skladištenja/transporta, pogledajte poglavlje 8.
- **NE savijajte** manžetnu prekomerno.
- **Pročitajte i držite se uputstava** iz dela „Pravilno odlaganje ovog proizvoda“ u poglavlju 10 prilikom odlaganja aparata i bilo kog korišćenog pribora ili opcionih delova.
- **NE koristite** ovaj aparat po isteku roka trajanja. Pogledajte poglavlje 8.

Rukovanje baterijama i upotreba baterija

- **NE ubacujte** baterije sa nepravilno okrenutim polaritetima.
- Sa ovim aparatom **koristite SAMO 2 „AAA“** alkalne baterije. NE koristite druge vrste baterija. NE koristite nove i korišćene baterije zajedno. NE koristite baterije različitih brendova zajedno.
- **Izvadite baterije** ako se aparat neće koristiti duže vreme.


- Ako Vam tečnost iz baterija dospe u oči, **odmah je isperite** sa puno čiste vode. Odmah se obratite svom lekaru.
- Ako Vam tečnost iz baterija dospe na kožu, **odmah je isperite** sa puno čiste mlake vode. Ako iritacija, povreda ili bol ne prestanu, posavetujte se sa lekarom.
- **NE koristite** baterije nakon isteka roka trajanja.
- **Povremeno proveravajte baterije** kako biste bili sigurni da su u dobrom radnom stanju.
- Koristite SAMO **baterije koje su predviđene** za ovaj aparat. Upotreba nepodržanih baterija može da ošteti i/ili može da bude opasna po aparat.

1. Upoznajte svoj aparat

1.1 Sadržaj

Aparat (glavna jedinica) sa manžetnom (potrošni materijal), 2 „AAA“ alkalne baterije (potrošni materijal), kutija za odlaganje (pribor), uputstvo za upotrebu.

1.2 Aparat za merenje krvnog pritiska

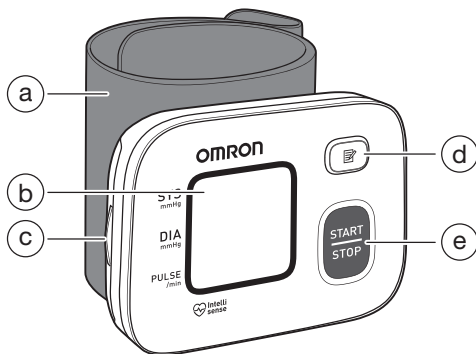

a. Manžetna za obim članka od 13,5 cm do 21,5cm (potrošni materijal)


b. Ekran

c. Odeljak za baterije


d. Taster za memoriju

e. Taster START/STOP

1.3 Ekran i simboli

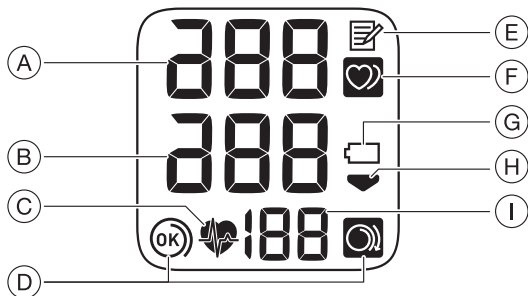

A	Rezultat merenja sistolnog krvnog pritiska	
B	Rezultat merenja dijastolnog krvnog pritiska	
C		Znak za otkucaje srca Treperi tokom merenja. Pojavljuje se ako je Vaš sistolni krvni pritisak 135 mmHg ili veći i/ili dijastolni krvni pritisak je 85 mmHg ili veći.
D		Simbol vodiča za obmotavanje manžetne (OK – u redu) Pojavljuje se ako je manžetna pravilno obmotana oko članka tokom merenja. Takođe se pojavljuje prilikom pregledanja prethodnih rezultata merenja.
		Simbol vodiča za obmotavanje manžetne (labavo) Pojavljuje se ako manžetna nije pravilno obmotana oko članka tokom merenja. Takođe se pojavljuje prilikom pregledanja prethodnih rezultata merenja.
E		Simbol funkcije memorije Pojavljuje se prilikom pregledanja rezultata sačuvanih u memoriji.
F		Simbol za nepravilan rad srca Pojavljuje se sa rezultatima kada se detektuje nepravilan ritam 2 ili više puta tokom merenja. Nepravilan rad srca podrazumeva ritam rada srca koji se za 25% razlikuje od prosečnog ritma rada srca izmerenog za vreme merenja krvnog pritiska. Ako nastavi da se pojavljuje, preporučujemo da se posavetujete sa lekarom i da sledite njegova uputstva.

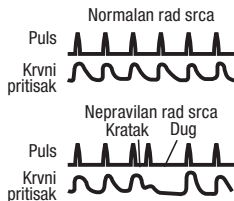

G	 treperi	Simbol baterije (slaba) Treperi kada su baterije na izmaku.
	 se pojavljuje	Simbol baterije (ispražnjena) Pojavljuje se kada su baterije prazne.
H		Simbol za ispušavanje Pojavljuje se tokom ispušavanja manžetne.
I	Prikaz pulsa / broja memorije Brzina pulsa se pojavljuje nakon merenja. Kada se pritisne taster  , broj memorije se pojavljuje na oko jednu sekundu pre nego što se brzina pulsa pojavi na ekranu.	

2013 ESH/ESC* smernice za kontrolisanje arterijske hipertenzije

Definicije hipertenzije u odnosu na nivoe krvnog pritiska izmerene na poslu i kod kuće

	Posao	Kuća
Sistolni krvni pritisak	≥ 140 mmHg	≥ 135 mmHg
Dijastolni krvni pritisak	≥ 90 mmHg	> 85 mmHg

Ovi rasponi su na osnovu statističkih vrednosti za krvni pritisak.

* Evropsko udruženje za hipertenziju (ESH) i Evropsko udruženje kardiologa (ESC).




Upozorenje:

- **NIKADA** sami ne postavljajte dijagnozu i ne određujte lečenje na osnovu rezultata merenja dobijenih ovim aparatom.
- **UVEK** se posavetujte sa svojim lekarom.


2. Priprema

2.1 Postavljanje baterija


1. Pritisnite poklopac za baterije i povucite nadole.

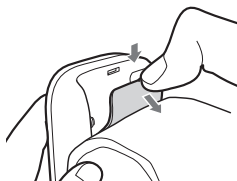

2. Ubacite 2 „AAA“ alkalne baterije kao što je naznačeno u odeljku za baterije.

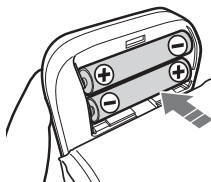

3. Zatvorite poklopac za baterije.

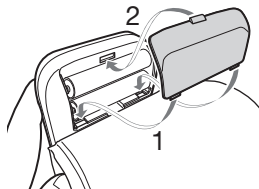

Napomena:

- Kada simbol „“ treperi na ekranu, preporučuje se da zamenite baterije.
- Da biste zamenili baterije, isključite aparat i izvadite obe baterije. Zatim ih zamenite sa 2 nove baterije istovremeno.
- Zamenom baterija se ne brišu prethodno sačuvani rezultati merenja.
- Baterije koje ste dobili uz aparat mogu imati kraći radni vek od novih baterija.
- Odlaganje korišćenih baterija treba obaviti u skladu sa lokalnim propisima.

2.2 Saveti u vezi sa merenjem krvnog pritiska

Da bi se obezbedilo tačno merenje krvnog pritiska, pratite sledeća uputstva:

- Stres podiže krvni pritisak. Izbegavajte da merenja vršite tokom stresnog perioda.
- Merenja treba obavljati na mirnom mestu.
- Važno je obavljati merenje u isto vreme svakog dana. Preporučuje se merenje ujutru i uveče.
- Ne zaboravite da vodite evidenciju o rezultatima merenja krvnog pritiska i pulsa za svog lekara. Jedno merenje ne daje tačnu indikaciju Vašeg pravog krvnog pritiska. Koristite dnevnik merenja krvnog pritiska da biste vodili evidenciju rezultata merenja tokom određenog vremenskog perioda. Da biste preuzeli PDF datoteke dnevnika, posetite veb sajt www.prizma.rs.



Bezbednosne napomene :

- Izbegavajte da se kupate, konzumirate alkohol ili kofein, pušite, vežbate i uzimate hranu najmanje 30 minuta pre merenja.
- Odmorite se najmanje 5 minuta pre merenja.

2.3 Postavljanje manžetne na članak ruke

Napomena

- Sledeći koraci se odnose na postavljanje manžetne na levi članak. Kada merenje vršite na desnom članku, manžetnu postavite na isti način kao i na levom.
- Krvni pritisak može da se razlikuje na desnom i levom članku stoga izmerene vrednosti krvnog pritiska mogu da budu različite. Kompanija OMRON preporučuje da za merenje uvek koristite isti članak. Ako se vrednosti između članaka znatno razlikuju, raspitajte se kod svog lekara na kom članku bi trebalo da obavljate merenje.




Bezbednosne napomene:


- Sklonite tesnu ili debelu odeću i druge predmete sa članka za vreme merenja.

1. Postavite manžetnu na levi članak.


Zavrnite rukav. Vodite računa da rukav ne bude previše čvrsto zavrnut oko ruke. To može da oslabi protok krvi u ruci.

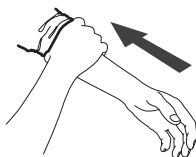**2. Provucite članak kroz obruč manžetne.**

Dlan i ekran aparata treba da budu okrenuti na gore.

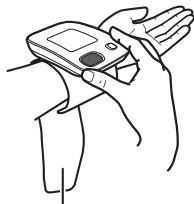

Manžetna za članak ruke


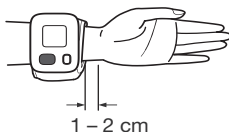
3. Manžetnu postavite tako da između nje i donjeg dela dlana postoji razmak od 1 do 2 cm.**4. Čvrsto obmotajte manžetnu oko članka. Nemojte je postavljati preko odeće. Vodite računa da ne bude praznog prostora između članka i manžetne.****Napomena**

Vodite računa da manžetna ne prekriva ispušćeni deo kosti spoljne strane članka.

2.4. Pravilno sedenje

Da biste obavili merenje, treba da budete opušteni i da udobno sedite na prijatnoj sobnoj temperaturi. Lakat stavite na sto da biste oslonili ruku.

- Sedite na stolicu tako da Vam noge ne budu prekrštene i da Vam stopala budu položena na pod.
- Sedite tako da su Vam leđa i ruka oslonjeni na neku površinu.
- Aparat treba da bude na približno istom nivou kao srce. Ako je aparat previše iznad srca, Vaš krvni pritisak će biti prividno nizak. Ako je aparat previše ispod srca, Vaš krvni pritisak će biti prividno visok.
- Opustite članak i šaku. Nemojte savijati članak unapred ili unazad, ili stezati pesnicu.

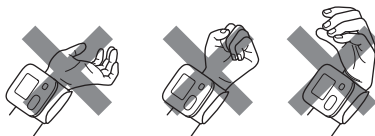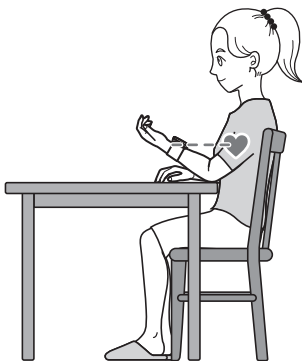

3. Korišćenje aparata

3.1 Merenje krvnog pritiska

Napomena

- Da biste prekinuli merenje, pritisnite taster START/STOP jednom da bi se manžetna ispumpala.



Bezbednosne napomene :

- NE koristite ovaj aparat istovremeno sa drugom medicinskom električnom (ME) opremom. To može da dovede do nepravilnog rada aparata i/ili netačno izmerenih vrednosti.
- Ostanite mirni i NE govorite za vreme obavljanja merenja.

1. Pritisnite taster START/STOP.

Svi simboli se pojavljuju na ekranu pre početka merenja.

2. Ostanite mirni, ne pomerajte se i ne govorite dok se ceo proces merenja ne završi.


Kako se manžetna naduvava, aparat automatski određuje idealni nivo naduvavanja. Ovaj aparat detektuje Vaš krvni pritisak i brzinu pulsa tokom naduvavanja. Simbol „“ treperi sa svakim otkucajem srca.

Napomena

- Simbol  se pojavljuje ako je manžetna pravilno obmotana oko članka ruke.
- Kada se prikaže simbol , manžetna nije pravilno postavljena. Pritisnite taster START/STOP da biste isključili aparat, a zatim pravilno postavite manžetnu.

Kada aparat detektuje krvni pritisak i brzinu pulsa, manžetna se automatski ispumpava. Vaš krvni pritisak i puls će se prikazati na ekranu.

Ako je rezultat merenja sistolnog ili dijastolnog krvnog pritiska visok (pogledajte odeljak 1.3), pojavljuje se simbol .

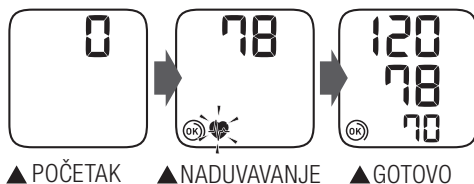

3. Pritisnite taster START/STOP da biste isključili aparat.

Napomena

- Aparat se automatski isključuje za 2 minuta.
- Sačekajte 2–3 minuta između merenja. Vreme čekanja omogućava da se arterije dekompresuju i vrate u stanje pre merenja. Može biti potrebno da povećate vreme čekanja u zavisnosti od sopstvenih fizioloških karakteristika.

4. Korišćenje funkcije memorije

Aparat automatski čuva do 30 rezultata merenja

4.1 Pregledanje rezultata merenja sačuvanih u memoriji


1. Pritisnite taster



Broj u memoriji se prikazuje na sekundu pre prikaza brzine pulsa. Poslednji rezultat merenja je obeležen brojem „1“.

Napomena

- Ako u memoriji nema sačuvanih rezultata merenja, prikazuje se ekran kao na slici sa desne strane.
- Ako je rezultat merenja visok (pogledajte odeljak 1.3), pojavljuje se simbol .
- Ako je memorija puna, aparat će brisati najstarije rezultate.

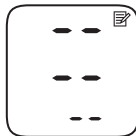


2. Uzastopno pritiskajte taster da biste se kretali kroz prethodne rezultate sačuvane u memoriji.

5. Druga podešavanja

5.1 Brisanje svih rezultata merenja sačuvanih u memoriji

1. Pritisnite taster , i pojaviće se simbol .
2. Dok držite taster , pritisnite i zadržite taster START/STOP duže od 2 sekunde.

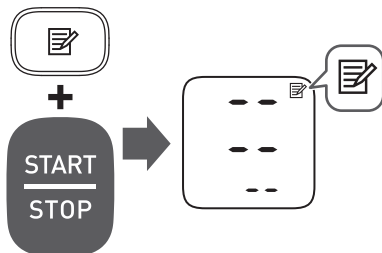

Napomena

- Svi rezultati merenja se brišu. Ne možete delimično obrisati rezultate sačuvane u memoriji.

6. Poruke o grešci i rešavanje problema

U slučaju da se tokom merenja pojavi bilo koji od problema u nastavku, prvo se uverite da se nijedan električni uređaj ne nalazi na udaljenosti manjoj od 30 cm od aparata. Ako se problem nastavi, pogledajte tabelu ispod.

Prikaz / problem	Mogući uzrok	Rešenje
 se pojavljuje ili se manžetna ne naduvava.	Manžetna nije pravilno postavljena. Manžetna ispušta vazduh.	Pravilno postavite manžetnu, a zatim ponovo obavite merenje. Pogledajte odeljak 2.3. Obratite se prodavcu ili servisnoj službi preduzeća PRIZMA.
 se pojavljuje	Manžetna je prekomerno naduvana i prelazi se 300 mmHg.	Ne dodirujte manžetnu tokom merenja.
 se pojavljuje	Pomerate se ili pričate tokom merenja. Vibracije ometaju merenje.	Ostanite mirni i ne govorite tokom merenja.
 se pojavljuje	Brzina pulsa nije pravilno detektovana.	Pravilno postavite manžetnu, a zatim ponovo obavite merenje. Pogledajte odeljak 2.3. Ostanite mirni i pravilno sedite tokom merenja.  nastavi da se pojavljuje, preporučujemo da se posavetujete sa lekarom.
 se pojavljuje		
 se pojavljuje		
 se pojavljuje	Aparat je neispravan.	Ponovo pritisnite taster START/STOP. Ako se „Er“ i dalje pojavljuje, obratite se prodavcu ili servisnoj službi preduzeća PRIZMA KRAGUJEVAC DOO.
 treperi	Baterije su na izmaku.	Preporučuje se zamena baterija sa 2 nove alkalne baterije. Pogledajte odeljak 2.1.

Prikaz / problem	Mogući uzrok	Rešenje
 se pojavljuje ili se aparat neočekivano isključio tokom merenja	Baterije su prazne.	Odmah zamenite obe baterije sa 2 nove alkalne baterije. Pogledajte odeljak 2.1.
Nema napajanja. Ništa se ne pojavljuje na ekranu aparata.	Baterije su potpuno prazne.	
	Polariteti baterija nisu pravilno postavljeni.	Proverite da li su baterije pravilno postavljene. Pogledajte odeljak 2.1.
Rezultati su previsoki ili preniski.	Krvni pritisak stalno varira. Mnogi faktori, uključujući stres, doba dana i način postavljanja manžetne mogu uticati na Vaš krvni pritisak. Vidite odeljke 2.2 - 2.4 i poglavlje 3.	
Javljaju se bilo koji drugi problemi.	Pritisnite taster START/STOP da biste isključili aparat, a zatim ga ponovo pritisnite da biste obavili merenje. Ako se problem nastavi, uklonite obe baterije i sačekajte 30 sekundi. Zatim ponovo postavite baterije. Ako se problem i dalje nastavi, obratite se prodavcu ili servisnoj službi preduzeća PRIZMA KRAGUJEVAC DOO.	

7. Održavanje

7.1 Održavanje

Da biste zaštitili aparat od oštećenja, poštujujte smernice navedene u nastavku:

- Pravo na reklamaciju se poništava nakon pravljenja izmena ili modifikacija koje nisu odobrene od strane proizvođača.



Bezbednosne napomene :

- NE rastavljajte i ne pokušavajte da popravite aparat ili druge komponente. Ovo može prouzrokovati neprecizno merenje.

7.2 Skladištenje

Kada aparat ne koristite, držite ga u kutiji za odlaganje.

- Aparat čuvajte na čistoj, sigurnoj lokaciji.

Aparat ne skladištite:

- Ako je mokar.
- Na mestima izloženim preterano visokim temperaturama, vlažnosti, direktnoj sunčevoj svetlosti, prašini ili korozivnim isparenjima, kao što je izbeljivač.
- Na mestima izloženim vibracijama ili udarcima.

7.3 Čišćenje

- Ne koristite nikakva abrazivna ili isparljiva sredstva.
- Koristite meku, suhu krpu ili meku krpu navlaženu neutralnim deterdžentom za čišćenje aparata i manžetne, a zatim ih prebrišite suvom krpom.
- Ne perite i ne potapajte aparat ili manžetnu u vodu.
- Ne koristite benzin, razređivače ili slične rastvarače za čišćenje aparata i manžetne.

7.4 Baždarenje i održavanje

- Tačnost ovog aparata za merenje krvnog pritiska je pažljivo isprobana i on je napravljen za dug vek trajanja.
- Uglavnom se preporučuje da aparat pregledate svake dve godine kako biste osigurali njegov ispravan rad i tačnost. Obratite se prodavcu ili servisnoj službi preduzeća PRIZMA KRAGUJEVAC DOO.

8. Tehnički podaci

Kategorija proizvoda	Elektronski sfigmomanometri
Opis proizvoda	Automatski aparat za merenje krvnog pritiska na članku ruke
Model (šifra)	RS2 (HEM-6161-E)
Ekran	LCD digitalni
Opseg pritiska manžetne	od 0 do 299 mmHg
Opseg merenja krvnog pritiska	SIS: 60 do 260 mmHg; DIA: 40 do 215 mmHg
Opseg merenja pulsa	40 do 180 otkucaja u minutu.
Tačnost	Pritisak: ± 3 mmHg Puls: $\pm 5\%$ od rezultata na ekranu
Napumpavanje	Automatsko pomoću električne pumpe
Ispumpavanje	Automatsko brzo ispumpavanje
Metod merenja	Oscilometrijski metod
Režim rada	Kontinuirani rad
IP klasifikacija	IP 22
Snaga	DC3 V 3.0 W
Izvor napajanja	2 „AAA“ alkalne baterije od 1,5 V
Trajanje baterije	Oko 300 merenja (sa novim alkalnim baterijama)
Period trajanja (radni vek)	5 godina
Uslovi za upotrebu	+10 °C do +40 °C / 15 do 90% RV (bez kondenzacije) / 800 do 1060 hPa
Uslovi za skladištenje / transport	-20 °C do +60 °C / 10 do 90% RV (bez kondenzacije)
Težina	Oko 85 g bez baterija
Dimenzije	Oko 84 mm (š) × 62 mm (v) × 21 mm (d) (bez manžetne za članak ruke)
Obim članka ruke na kome se može meriti	13,5 do 21,5 cm
Memorija	Čuva do 30 rezultata merenja
Sadržaj	Aparat, kutija za odlaganje, 2 „AAA“ alkalne baterije, uputstvo za upotrebu
Zaštita od strujnog udara	Medicinska električna oprema sa internim napajanjem
Primenjeni deo	Tip BF (manžetna)
Maksimalna temperatura primenjenog dela	Niža od +48 °C

Napomena

- Ove specifikacije se mogu menjati bez najave.
- Prilikom kliničkih ispitivanja, K5 je korišćen na 85 subjekata za određivanje dijastolnog krvnog pritiska.
- Ovaj aparat je klinički ispitan u skladu sa zahtevima standarda ISO 81060-2:2013.
- IP klasifikacija predstavlja stepen zaštite koju obezbeđuje kućište u skladu sa standardom IEC 60529. Ovaj aparat je zaštićen od čvrstih stranih predmeta prečnika 12,5 mm i većih prečnika, kao što je prst, i od kapljica vode koje padaju pod uglom, koji mogu izazvati probleme tokom normalnog rada.
- Ovaj uređaj nije odobren za upotrebu na trudnicama.

9. Smernice i deklaracija proizvođača

CE 0197 UK
CA
0086

- Ovaj aparat za merenje krvnog pritiska je izrađen u skladu sa evropskim standardom EN1060, Neinvazivni sfigmomanometri – Deo 1: Opšti zahtevi i Deo 3: Dodatni zahtevi za elektromehaničke sisteme za merenje krvnog pritiska.
- Ovaj OMRON proizvod je proizveden uz primenu preciznog sistema za kontrolu kvaliteta kompanije OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japan.
Najbitniji deo OMRON aparata za merenje krvnog pritiska – senzor pritiska – proizvodi se u Japanu.

Opis simbola			
	Primenjeni deo – Tip BF Stepen zaštite od strujnog udara (curenje struje)		Ograničenje atmosferskog pritiska
IP XX	Stepen zaštite od ulaska stranih tela prema standardu IEC 60529		Ograničenje vlažnosti vazduha
CE	CE oznaka	 13,5 - 21,5 cm	Pokazuje pravilan položaj aparata na članku ruke Obim članka ruke na kome se može meriti krvni pritisak
UK CA	Oznaka UKCA		Datum proizvodnje
SN	Serijski broj		Baterija
UDI	Jedinstveni identifikator uređaja		Jednosmerna struja
MD	Medicinsko sredstvo		Korisnik treba da pažljivo prati instrukcije iz ovog uputstva za upotrebu, radi svoje bezbednosti.
	Ograničenje temperature		Korisnik treba da pogleda ovo uputstvo za upotrebu

Važne napomene o elektromagnetnoj kompatibilnosti (EMK)

RS2 koji je proizvela kompanija OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. usaglašen je sa standardom elektromagnetne kompatibilnosti (EMK) EN60601-1-2:2015.

Dodatna dokumentacija u skladu sa ovim EMK standardom je dostupna na veb sajtu www.omron-healthcare.com. Informacije o EMK za HEM-6161-E pogledajte na internet adresi.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Otpad električne i elektronske opreme)

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili u njegovoj literaturi, ukazuje da ga na kraju radnog veka ne treba uklanjati sa drugim kućnim otpadom.

Da biste sprečili moguće nanošenje štete životnoj sredini ili ljudskom zdravlju usled nekontrolisanog bacanja otpada, molimo Vas da odvojite ovaj proizvod od ostalih vrsta otpada i odgovorno ga reciklirate kako biste potpomogli održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici aparata u kućnom okruženju treba da se obrate prodavcu od kojeg su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj službi da bi saznali detalje o tome gde i kako mogu da vrate ovaj artikal na reciklažu koja je bezbedna po životnu sredinu. Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod ne treba mešati sa drugim komercijalnim otpadom namenjenim za bacanje.



Proizvođač 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN		
Predstavnik u EU <table border="1" data-bbox="70 899 215 943"> <tr> <td>EU</td> <td>REP</td> </tr> </table>	EU	REP	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp, HOLANDIJA www.omron-healthcare.com
EU	REP		
Proizvodni pogon	OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD. No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, VIJETNAM		
Podružnice	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK; www.omron-healthcare.com		
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheim, NEMAČKA ; www.omron-healthcare.com		
	OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCUSKA ; www.omron-healthcare.com		
Uvoznik / Ovlašćeni predstavnik proizvođača	PRIZMA KRAGUJEVAC DOO Kumanovska 8, 34000 Kragujevac, SRBIJA www.prizma.rs		
Broj rešenja ALIMS Srbije / Verzija	002964292 2026 59010 009 000 515 059 04 002 / 08-2026		

KOMERCIJALNA GARANCIJA I GARANTNI LIST

1. Izjavljujemo da ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja potrošač besplatno ostvaruje na osnovu Zakona o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti trgovca za nesaobraznost robe ugovoru, koja traje 2 godine od dana kada je roba isporučena potrošaču.
 2. Davalac garancije se obavezuje da, pod uslovima i uz ograničenja iz ove izjave, obezbedi:
 - besplatnu popravku proizvoda u slučaju neispravnosti ili nedostatka koji je posledica greške u proizvodnji ili materijalu;
 - besplatnu zamenu proizvoda ukoliko popravka nije moguća;
 - povraćaj novca ukoliko popravka ili zamena proizvoda nije moguća.
 3. Garancija ne obuhvata pribor i potrošni materijal koji se prirodno troši tokom redovne upotrebe proizvoda (navedeni u uputstvu za upotrebu).
 4. Garantni rok iznosi 5 godina i počinje da važi od datuma isporuke proizvoda potrošaču, a što se dokazuje računom ili drugim odgovarajućim dokazom o kupovini.
 5. Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.
 6. Pre podnošenja reklamacije, preporučuje se da potrošač proveri da li proizvod koristi u skladu sa uputstvom za upotrebu i uobičajenom namenom.
 7. Potrošač može izjaviti reklamaciju na jedan od sledećih načina:
 - neposredno na prodajnim mestima PRIZMA KRAGUJEVAC DOO;
 - besplatnim telefonskim pozivom na broj 0800 200 000, elektronskim putem na e-mail adresu: info@prizma.rs ili na trajnom nosaču podataka;
 - pisanim putem na adresu davaoca garancije: Kumanovska 8, 34 000 Kragujevac.
- Za utvrđivanje osnovanosti i rešavanje reklamacije potrebno je da potrošač dostavi:
- proizvod radi pregleda i provere ispravnosti;
 - račun ili drugi odgovarajući dokaz o kupovini;
 - opis reklamacije i zahtev za rešavanje reklamacije, usmeno ili pisanim putem u slobodnoj formi ili na reklamacionom listu koji se može preuzeti u prodajnim mestima PRIZMA KRAGUJEVAC DOO ili na sajtu www.prizma.rs.
- Za pomoć i dodatne informacije o pravima po osnovu garancije i načinu podnošenja reklamacije potrošači se mogu informisati putem email adrese: info@prizma.rs ili putem telefona 0800 200 000.
8. Prava po osnovu komercijalne garancije se ne mogu ostvariti ukoliko potrošač ne dostavi račun na uvid ili drugi odgovarajući dokaz o kupovini.
 9. Garancija ne pokriva neispravnosti ili oštećenja nastala usled:
 - nepoštovanja uputstva za upotrebu, nepravilne upotrebe i neodgovarajućeg održavanja proizvoda;
 - popravke, prepravke ili izmene proizvoda od strane neovlašćenog lica;
 - upotrebe potrošnog materijala, pribora, delova i/ili opreme koje nije isporučio ili odobrio proizvođač
 - mehaničkih ili estetskih oštećenja nastalih usled nepravilnog rukovanja proizvodom, spoljašnjeg uticaja ili curenja baterija koje nije posledica nesaobraznosti proizvoda;
 - delovanja više sile ili prirodnih nepogoda (strujni udari, poplave, požari i slično).
 10. PODACI O PROIZVODU

NAZIV PROIZVODA	AUTOMATSKI APARAT ZA MERENJE KRVNOG PRITISKA
PROIZVOĐAČ / MODEL	OMRON / RS2
FABRIČKA OZNAKA	HEM-6161-E
DAVALAC GARANCIJE	PRIZMA KRAGUJEVAC DOO; Kumanovska 8, Kragujevac, MB: 07377754



OBAVEŠTENJE O SAOBRAZNOSTI

Trgovac je dužan da potrošaču isporuči proizvod saobrazan ugovoru i odgovoran je za nesaobraznost proizvoda ukoliko se ista pojavi u roku od **dve godine** od dana isporuke proizvoda potrošaču.

U slučaju nesaobraznosti proizvoda, potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju, uz račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini. Potrošač ima pravo na besplatno otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom, odnosno ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, na odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora.

Potrošni materijal i pribor (navedeni u ovom uputstvu za upotrebu) podležu odgovornosti za nesaobraznost ukoliko imaju nedostatak materijala, izrade ili funkcionalnosti. Potrošnja ili habanje tih delova tokom redovne upotrebe ne smatra se nesaobraznošću.

Trgovac nije odgovoran za neispravnost i oštećenja nastala usled:

- Mehaničkih oštećenja (krivicom potrošača ili treće osobe) i curenja baterija
- Nepoštovanja preporuka datih u uputstvu za upotrebu i neodgovarajuće brige o proizvodu
- Vršnja popravki, prepravki ili izmena u strukturi proizvoda od strane neovlašćenih lica
- Upotrebe potrošnog materijala, pribora, delova, i/ili opreme koje nije isporučio proizvođač, ukoliko je njihova upotreba prouzrokovala neispravnost ili oštećenje
- Delovanja više sile ili prirodnih nepogoda kao što su poplave, požari, zemljotresi, udari groma i dr.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim obaveštenjem primenjuje se važeći Zakon o zaštiti potrošača.

PRIZMA
PRIZMA KRAGUJEVAC DOO